

New Polisher Debut!

# 試料研磨機

金相機器と精密切断機の総合メーカー

 Refine Tec

RPO-1208 リファイン・ポリッシャー、200HV

高性能、使いやすさ、経済性を追求した

ベストセラーシリーズ

リニューアル



## What's new

### ■ アタッチメント接続用コネクタを標準装備

アタッチメント接続用コネクタが標準装備されている為、あとから簡単にアタッチメント（オートマックス）を増設することが可能です。

### ■ 研磨トルクが約20%アップ※1

速度比の見直しにより、従来のシリーズから研磨ディスクのトルク値が約20%アップしました。これにより従来品ではかけられなかった高い圧力を加えることが可能になりました。

### ■ 高剛性と環境に配慮したスチールボディを採用

従来の樹脂製ボディから、安定した研磨と廃棄時の環境に配慮して金属製ボディを採用しました。

電 源	単相100Vまたは 三相200V	注水入切	電磁弁※2
モータ出力	400W	水量調整	手動バルブ
回 転 数	50～480rpm	寸 法	W430 × D660 × H335mm (テーブル面まで)
研磨ディスク	Φ203 × t8mm アルミ盤	重 量	50kg

※1 従来のシリーズ(RPO-128K)と比較した理論値です。その実性能を保障するものではありません。

※2 標準仕様では工業用水は使用できません。

New



研磨機アタッチメント

# オートマックス

AMU-220 オートマックス 200


より使いやすくなった  
研磨機アタッチメントの  
新定番

## What's new

### ホルダー位置の左右調整が可能


試料ホルダーを任意の位置に変更できるようになりました。

これによりホルダーを研磨ディスクの外に出したり、内に入れたりと思い通りの研磨が可能です。

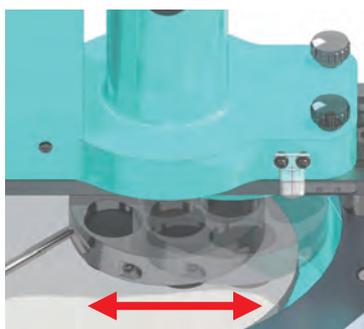

### モータ出力が25Wにパワーアップ

モータトルクがアップしたことにより、高い圧力を加えた時でもより安定した研磨ができるようになりました。

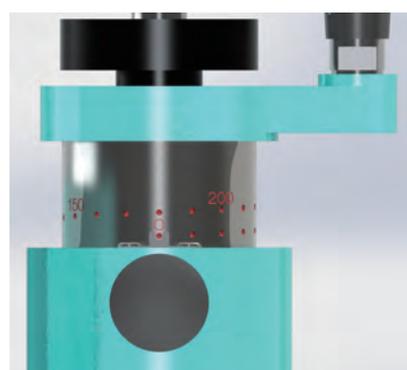

### 加圧調整が分かりやすくなりました。

加圧ネジ部に標点と数値が表記され、より正確な加圧調整が可能になりました。

電 源	単相100V または 三相200V
モータ出力	25W
回 転 数	40rpm (50Hz), 48rpm (60Hz)
加 圧 力	0~300N
寸 法	W340 × D130 × H320mm
重 量	12kg (スプラッシュリング含む)

ホームページが  
新しくなりました。

詳しくはココから検索



<https://refinetec.com/>

 リファインテック株式会社

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東5-6-37

本社  
TEL. 045-542-1013

大阪営業所  
TEL. 06-6482-2503

名古屋営業所  
TEL. 052-502-7011

水戸営業所  
TEL. 029-241-2522